

Logik

Bioinfo

Assessoria em
Bioinformática e
Projetos Acadêmicos

 @logikbioinfo

www.logikbioinfo.com.br



**Explore exemplos
do nosso portfólio:**


 **@logikbioinfo**

www.logikbioinfo.com.br

Logik **Bioinfo**

Assessoria em
Bioinformática e
Projetos Acadêmicos

E muito mais!

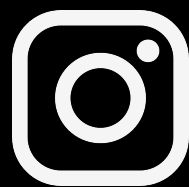

@logikbioinfo



(11) 92004-5896

www.logikbioinfo.com.br

Processamento Microbiológico

ISOLAMENTO

Ágar KPC Cromogênico – ALTERNATIVA MAIS RÁPIDA

1. Aguardar que o meio atinja a temperatura ambiente antes da inoculação;
2. Retire o swab do tubo de transporte e confirme que existe material fecal na ponta do swab (confirmação visual da amostra), em seguida semeie diretamente as amostras por esgotamento.
3. O inóculo inicial deve cobrir entre um quarto e um terço da placa (Figura 1).
4. O swab deve ser rolado sobre toda área de inoculação para maximizar a recuperação dos microrganismos, tomando cuidado para evitar as bordas da placa.
5. Incubar as amostras em condições de aerobiose a $35^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ durante 18-24 horas.

Fonte: Plastlabor. Bula CHROMAGAR KPC (PL 0295). Setembro de 2022.

Ágar MacConkey Com Discos De Carbapenêmicos:

PROCEDIMENTO:

1. Aguardar que o meio atinja a temperatura ambiente antes da inoculação;
2. Retire o swab do tubo de transporte e confirme que existe material fecal na ponta do swab (confirmação visual da amostra), em seguida semeie diretamente as amostras por esgotamento;
3. Posicione assepticamente os discos de Ertapenem, Meropenem e Imipenem.
4. Incubar as amostras em condições de aerobiose a $35^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ durante 18-24 horas.


O EUCAST sugere o uso de Meropenem 10µg como carbapenem indicador, pois oferece o melhor compromisso entre sensibilidade e especificidade. Na falta de discos de Meropenem na rotina, substituir por Imipenem ou Doripenem.

Uso do Ertapenem:

Embora o ertapenem tenha maior sensibilidade, seu uso não é recomendado, pois além da baixa especificidade para produtores de carbapenemases, é incapaz de diferenciar isolados resistentes de *Acinetobacter* spp. (são intrinsecamente resistentes a este carbapenem.)

 $35 \pm 2^{\circ}\text{C}$

 16-24 horas

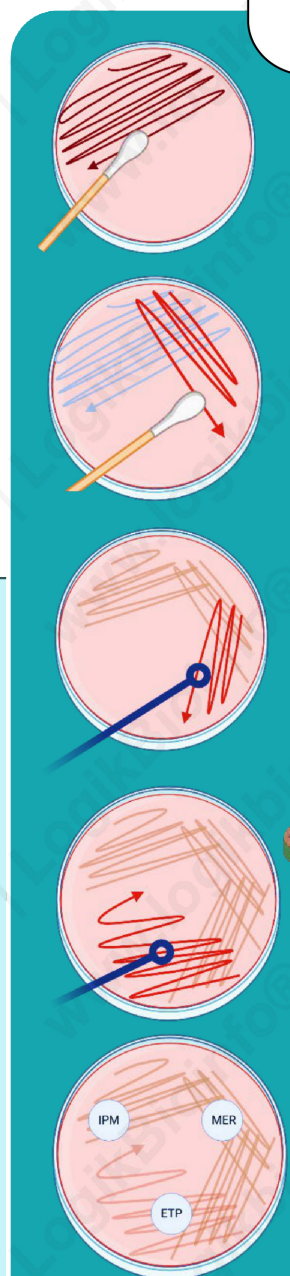


Microbiologia Preparo de Guias Ilustrados


 @logikbioinfo

 (11) 92004-5896

 contato@logikbioinfo.com.br

 www.logikbioinfo.com.br

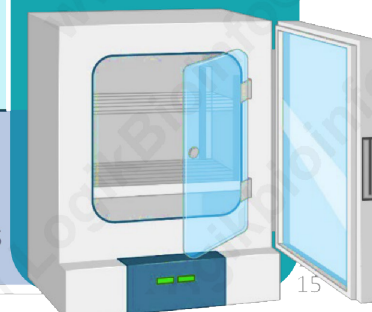

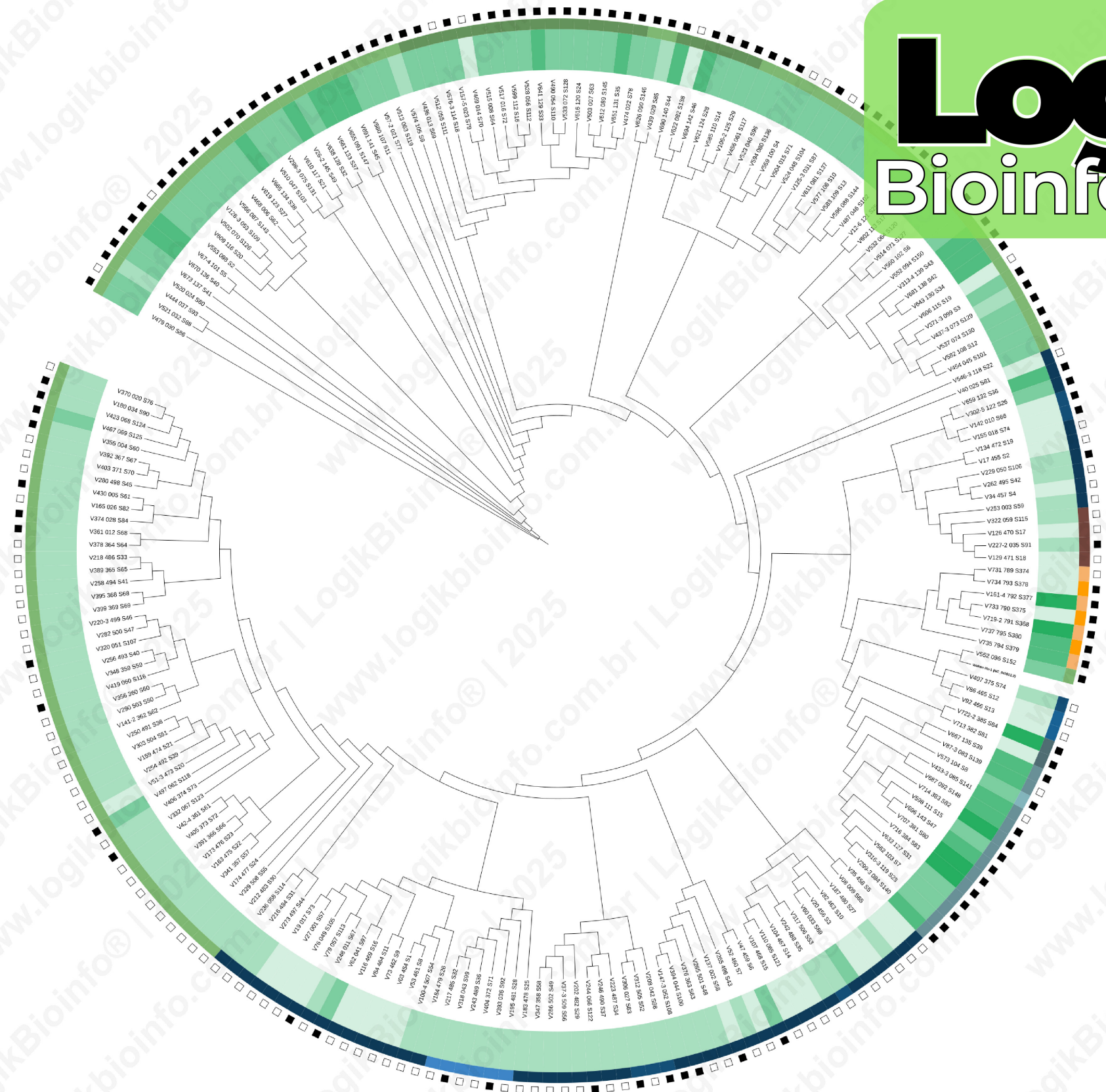

Variant

- P.2
- P.1.7
- P.1
- AY.99.2
- B.1.1.28
- B.1.1.33
- N.9
- AY.101
- P.1.14
- BA.1
- AY.34.1.1
- B.1.1
- AY.43.1
- P.7
- BA.1.14
- B.1.234
- B.1.1.332
- B.1

Vaccination


- 2 dose vaccinated

Sample Collection Date

- Interval 1: July 2020 - October 2020
- Interval 2: November 2020 - February 2021
- Interval 3: March 2021 - June 2021
- Interval 4: July 2021 - October 2021
- Interval 5: November 2021 - February 2022

Microbiologia | Virologia – Ilustrando mutações no genoma do SARS-CoV-2

Análise da filogenia e das mutações do COVID-19

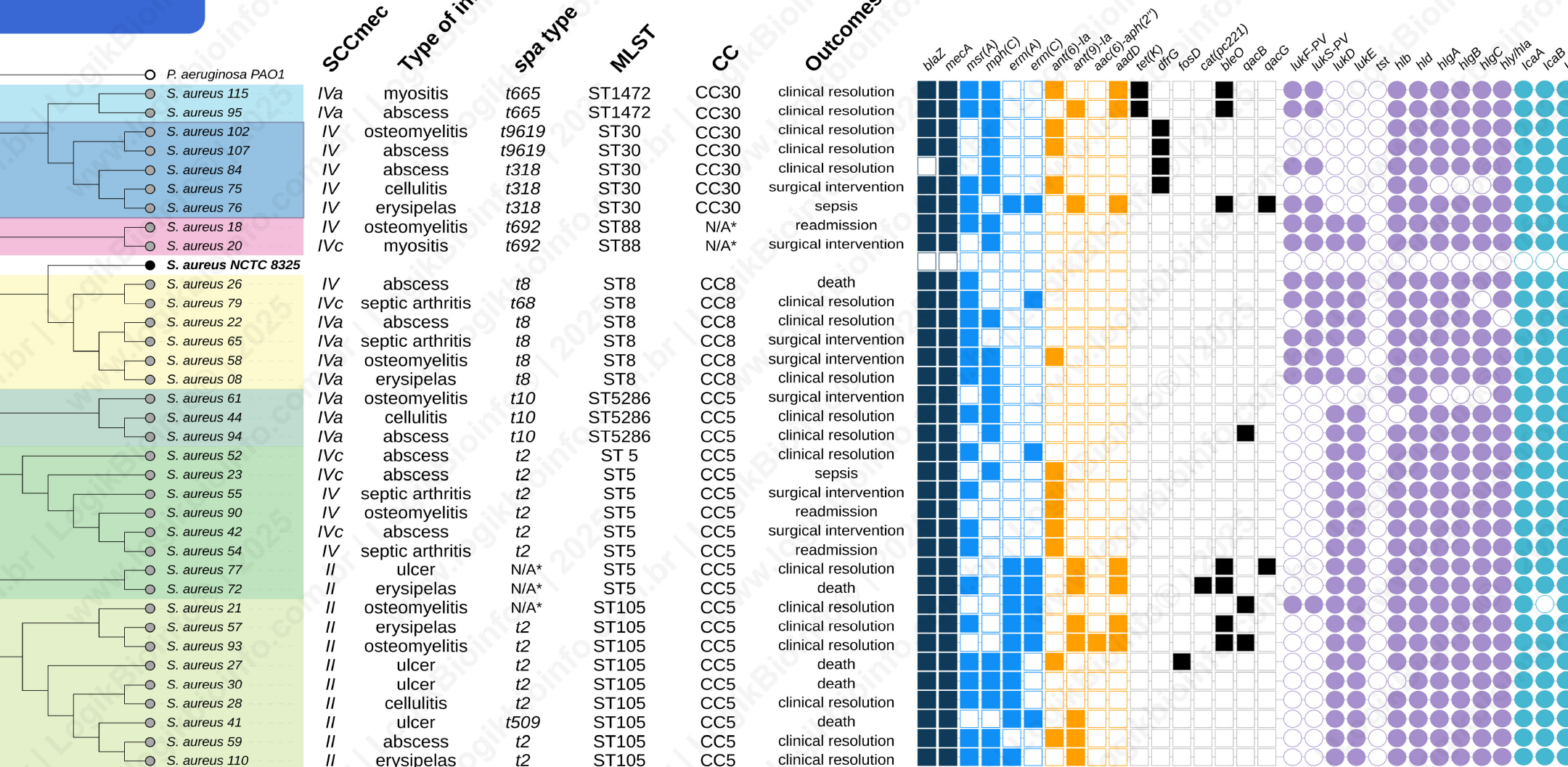

Logik | Bacteriologia – Caracterizando linhagens e sua relevância

Análise dos genes de resistência aos antibióticos

Logik Bioinfo

Assessoria em
Bioinformática e
Projetos Acadêmicos



(11) 92004-5896



@logikbioinfo



contato@logikbioinfo.com.br

Precisa de ajuda em sua pesquisa?

Oferecemos soluções completas!



Sequenciamento

Genômica completa,
pangenoma, filogenia,
metagenômica e mais



Análise Estatística

R, testes de hipóteses,
modelagem estatística e
machine learning



Formatação e Referências

Normas (ABNT, APA) e
organização de bibliotecas
(Zotero, Mendeley)



Submissão de Dados

Submissão de dados em
plataformas públicas
como NCBI e ENA



Desenvolvimento de Pipelines

Automação de análises para
garantir consistência e
reprodutibilidade



Preparação de Apresentações

Criação de slides profissionais
em PowerPoint ou LaTeX
(Beamer)

Apoio científico em **todas** as etapas do seu projeto.


Acesse o nosso site:

www.logikbioinfo.com.br

Emitimos nota fiscal, atendendo plenamente às
necessidades de auditoria e prestação de contas.



Escaneie o
QR Code
com seu
celular

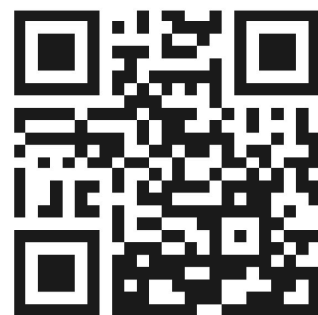



Precisa de ajuda em sua pesquisa?

Oferecemos soluções completas!



Sequenciamento

Genômica completa,
pangenoma, filogenia,
metagenômica e mais



Análise Estatística

R, testes de hipóteses,
modelagem estatística e
machine learning



Formatação e Referências

Normas (ABNT, APA) e
organização de bibliotecas
(Zotero, Mendeley)



Submissão de Dados

Submissão de dados em
plataformas públicas
como NCBI e ENA



Desenvolvimento de Pipelines

Automação de análises para
garantir consistência e
reprodutibilidade



Preparação de Apresentações

Criação de slides profissionais
em PowerPoint ou LaTeX
(Beamer)

Apoio científico em **todas** as etapas do seu projeto.

Acesse o nosso site:

www.logikbioinfo.com.br

Emitimos nota fiscal, atendendo plenamente às
necessidades de auditoria e prestação de contas.

